


Hotte PCR


LA HOTTE IDEALE POUR L'AMPLIFICATION GENIQUE

Volume de protection sous éclairage ultraviolet pour la décontamination. La hotte type PCR se décline en trois dimensions :

- PCR 6 : 60 cm
- PCR 9 : 90 cm
- PCR 12 : 120 cm

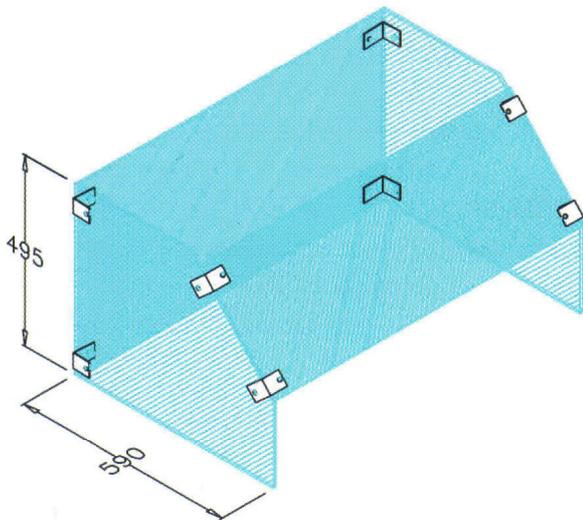

- 1-2 Equerres INOX
- 3-4 Glaces latérales
- 5- Glace arrière
- 6-7 Equerres INOX
- 8- Face inclinée

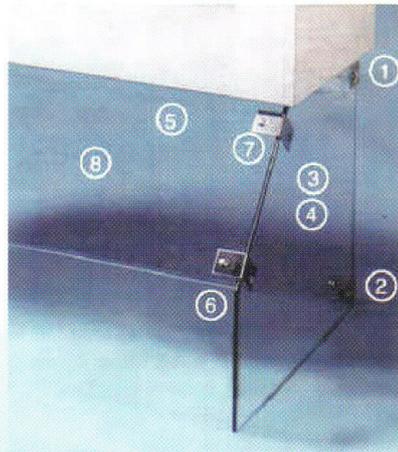

Structure

En latté stratifié toutes faces tous champs, avec revêtement intérieur en aluminium brossé.

Le volume de travail est en verre securit. Le verre garantit un confinement total et protège ainsi le manipulateur des rayonnements UV. La face inclinée offre un grand confort de travail.

OPTIONS

- Plan de travail amovible
- Table et piétement adaptés
- Obturateur
- Compteur horaire

Equipement

Lampe U.V germicide (longueur d'onde 253,7 nm). Cet éclairage est commandé par un chronopeteur 0-60 minutes.

