

T POSTE D'EXTRACTION

PROTECTION DE L'OPÉRATEUR



Exemple avec placard (option)

Les postes de type T sont destinés à **protéger le manipulateur et son environnement** proche grâce à un système d'extraction vers l'extérieur. De construction en matériaux non générateurs de particules, ils peuvent être installés directement **en salle blanche**. L'optimisation des dimensions leur permet de s'intégrer dans tout type de laboratoire **bas de plafond**.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Poste à poser sur paillasse
- Structure PVC ou bois latté stratifié
- Casquette verre sécurit
- Grilles d'extraction réglables
- Ouverture totale en face avant (libre accès au volume de travail)
- Simplicité d'installation sur réseau d'extraction

■ UTILISATIONS

- Chimie
- Pharmaceutique
- Electronique
- Hospitalier
- Etc ...



T83 avec casquette spéciale (option)

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE ASSUREES PAR LE CONSTRUCTEUR ADS LAMINAIRE




■ PRINCIPE

La protection du manipulateur est assurée par la dépression du volume de travail et l'aspiration complète de toutes les émanations gazeuses, légères ou lourdes. La présence de grilles sur différents niveaux permet une aspiration homogène, ce flux est canalisé par une casquette en verre.

Les postes de type T sont recommandés pour les applications suivantes :

- Extraction des vapeurs nocives
- Nettoyages aux solvants
- Opérations de soudure et d'étamage
- Etc ...

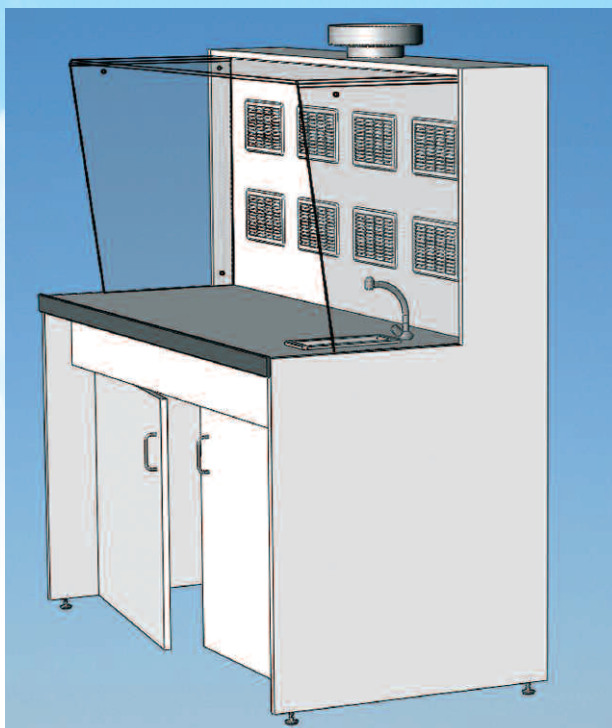

Modèle TPL : T avec placard en dépression (intégrations en option)



Les différentes hottes de type T standard

■ OPTIONS

- Matériaux spécifiques : PPH, PVC blanc
- Piètement (avec plan de travail)
- Placard en dépression (stockage de produits chimiques) : modèle TPL
- Intégrations spécifiques (évier, robinet...)
- Ventilateur d'extraction (voir plaquette détaillée)
- Réseau d'extraction (nous consulter)
- Volets de réglage (registre)
- Eclairage

■ DIMENSIONS

Dimensions (mm)	T81		T82		T83		T84	
	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout
Largeur (L)	784	800	784	800	1204	1220	1484	1500
Hauteur (H)	267	275	Utiles : 642		Hors Tout : 650			
Profondeur (P)	Utiles : 340				Hors Tout : 590			
Diamètre	125		160		200		200	
Débit estimatif (m ³ /h)	300		700		1000		1200	

Documents :

Les documents suivants sont remis à la livraison :

- Certificat de garantie
- Livret d'utilisation en Français

