

MINISPACE


Enceinte à flux vertical – Classe ISO 5



Protection :
Manipulation

Conforme à la norme :
ISO 14644

- ✓ Régulation automatique ECM
- ✓ Affichage des vitesses de flux
- ✓ Ouverture totale de la face avant Volume
- ✓ de travail transparent Plan de travail en
- ✓ inox
- ✓ Eclairage LED
- ✓ Ergonomie: ouverture latérales et facade inclinée

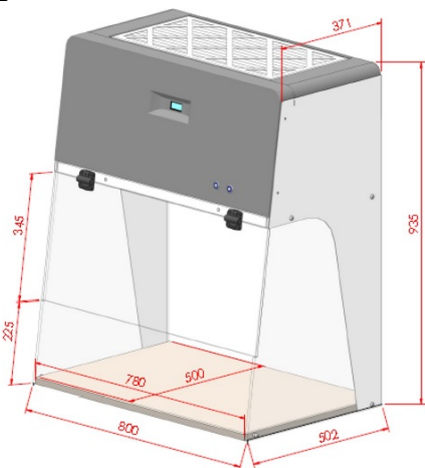

La MINISPACE est constituée d'un caisson de soufflage et de filtration, garantissant un travail en milieu stérile. Les hottes de classe ISO 5 sont destinées à protéger la manipulation grâce à un flux d'air stérile vertical. La MINISPACE est complètement automatique, dispose d'un éclairage LED et convient à toutes configurations de laboratoires.

MINISPACE		
	Utiles	Hors tout
Largeur (mm)	780	800
Hauteur (mm)	Utile : 650 – Hors Tout : 935 sur piétement 1766	
Profondeur (mm)	Utile : 500 – Hors tout : 510	
Poids (Kg)	50	

 ADS Laminaire
Air Dépoussiéré Stérile Laminaire



ADRESSE :

34 Rue Maurice de Broglie | ZI Les Mardelles
93600 Aulnay-Sous-Bois | France

Tél : 01 48 17 85 10 | Fax : 01 48 17 85 11



Télécharger nos
catalogues



www.adslaminaire.com



info@adslaminaire.com



Vidéo de
présentation