

UNIVERS MAV - MAV

SORBONNE À RECIRCULATION (ETRAF)



Univers MAV

■ CARACTERISTIQUES :

- Volume de travail en verre sécurit
- Filtre à charbon actif
- Préfiltre au rejet
- Compteur horaire
- Variateur de vitesse
- Eclairage
- Alimentation mono 220 V
- Avantage : montage et changement du filtre possible par vos soins

■ FILTRES À CHARBON ACTIF :


La filtration se fait grâce à un **charbon actif** qui capte les gaz et vapeurs transportés par l'air qui le traverse.

La **durée de vie** des filtres à charbon actif est en moyenne de 6 à 12 mois. Cette durée est liée à la quantité des évaporations et au type de produits toxiques émis dans le volume de travail, ainsi qu'aux conditions environnementales (température, hygrométrie).

DOUBLE PROTECTION : OPERATEUR ET ENVIRONNEMENT

Les hottes en dépression sont destinées à **protéger le manipulateur** et son **environnement proche** des produits volatiles, nocifs ou malodorants grâce à un système d'aspiration verticale sur charbon actif...

■ PRINCIPE :

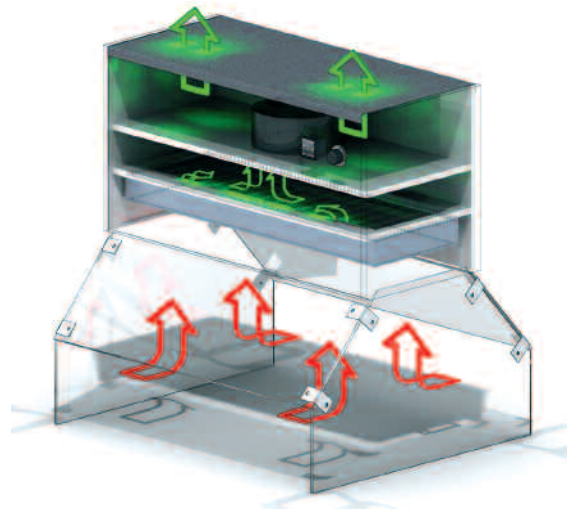

MAV en vis-à-vis


La vitesse frontale d'aspiration (0,5m/s) permet une reprise homogène et complète de toutes les émanations.

Le recyclage est total dans le local, ce qui évite un raccordement vers l'extérieur.

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE ASSUREES PAR LE CONSTRUCTEUR ADS LAMINAIRE

INF - COM - 31 - R&A. Document non contractuel. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis

■ TYPE UNIVERS MAV :

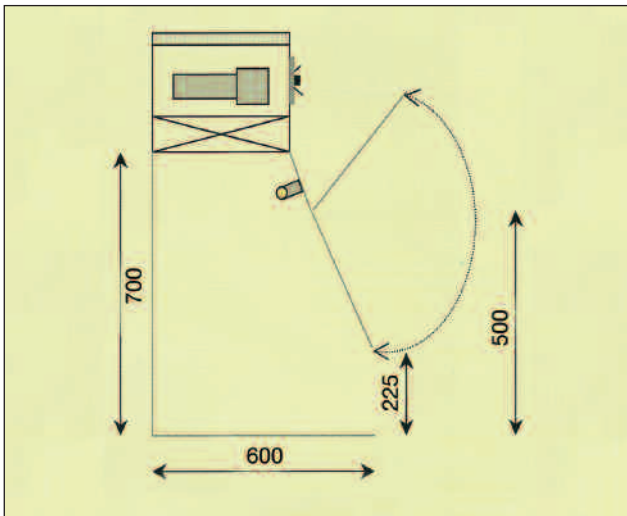


Particularités de ce poste :

- Visière rabattable en métacrylate de méthyle
- Caisson en ABS
- Modèle standard grande série et économique

Dimensions (mm)	Univers MAV	
	Utiles	Hors tout
Largeur	905	925
Hauteur	700	1030
Profondeur	592	600
Poids total	30	
Poids du charbon actif	11 kg	

■ TYPE MAV :

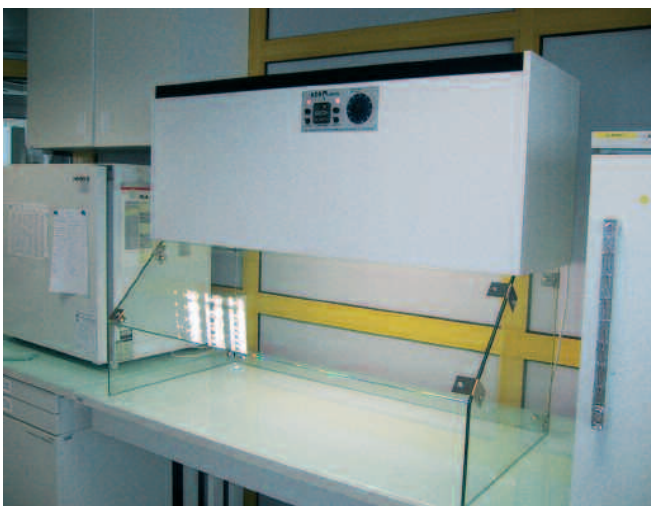

Monoposte MAV



Poste en vis-à-vis MAV

Particularités de ce poste :

- Visière fixe en verre sécurit
- Caisson en bois latté stratifié

■ OPTIONS :

- Visière rabattable
- Piètement avec plan de travail
- Rehausse du volume en verre
- Charbon actif spécifique

Documents :

Les documents suivants sont remis à la livraison :

- certificat de garantie
- livret d'utilisation en Français

Dimensions (mm)	MAV 6/61		MAV 9/91		MAV 12/121	
	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout
Largeur	605	660	910	965	1215	1270
Hauteur	Utile : 500		Hors tout : 940			
Profondeur monoposte	590					
Profondeur vis à vis	800					
Poids total	40 kg		50 kg		60 kg	
Poids du charbon actif	10 kg		15 kg		20 kg	