


EQL

PLAFOND SOUFFLANT - CABINE DE PESEE

Fabriqué en France

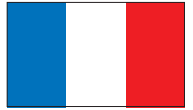

CONFORME A LA NORME ISO 14644



ADS Laminaire a mis au point le plafond soufflant à flux laminaire vertical (à recyclage et extraction conjugués) de type PS/EQL. Ce type de flux laminaire

(PS/EQL) est particulièrement adapté aux manipulations et conditionnements de poudres allergènes, antibiotiques, hormones ... Le PS/EQL offre à la fois une garantie de :

- stérilité parfaite pour la manipulation
- protection du manipulateur et de l'environnement

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'air stérile est pulsé du haut du PS/EQL sous forme de flux laminaire et est intégralement repris au niveau du sol par une grille d'aspiration. L'extraction sur filtre absolu produit une veine d'air, et crée à la périphérie basse du volume (au ras du sol) une dépression ayant plusieurs effets :

- entraîner les aérosols émis lors de la manipulation, évitant ainsi toute accumulation de poudre au niveau du sol
- renouvellement d'air du volume de travail, abaissant ainsi la température




APPLICATIONS

- Manipulation et pesée de poudres
- Prélèvement
- Conditionnement

FILTRES ABSOLUS

(au soufflage et au rejet)

Type H.E.P.A. : Efficacité de 99,999% pour des particules de 0,3 micron contrôlé au test DOP et détection de fuites

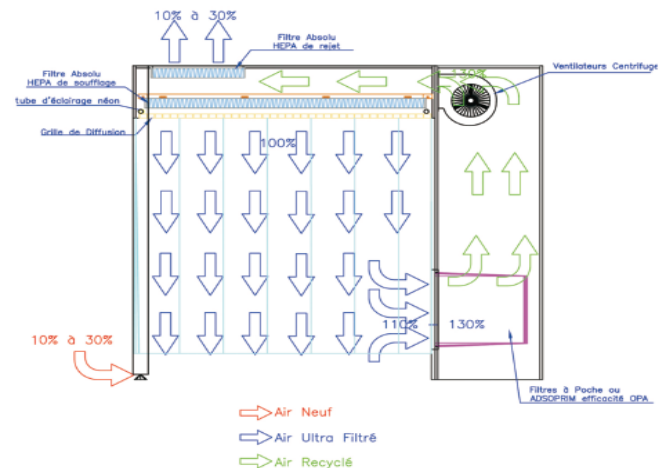

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE ASSUREES PAR LE CONSTRUCTEUR ADS LAMINAIRE



Cabine avec reprise par plan de travail perforé



Cabine 100% air neuf - Industrie cosmétique




Caissons sécuritifs BAG In / BAG Out



Cabine industrie pharmaceutique

FILTRE DE REPRISE

Filtre «à poches». Possède une grande capacité, un grand débit d'air, une très haute efficacité : 95% pour des particules de 5 microns (OPACIMETRIQUE).

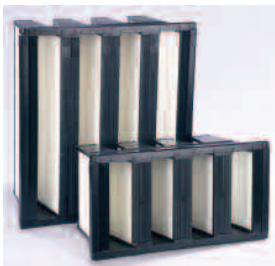

Filtres à poches rigides



Filtres G4 en préfiltration (option)



Affichage des débits



Manomètre à aiguille pour contrôle ΔP sur filtres de soufflage et de reprise



Cabine intégrant un système informatique de pesée
Niche Informatique et table pour pesée fine. Industrie Pharmaceutique

OPTIONS

- Filtre à charbon actif
- Rejet vers l'extérieur
- Plafond mobile
- Intégration de matériel
- Caisson Bag In / Bag Out
- Parois rigides
- Qualification QI/QO
- Cadres toilés- voile de laminarité
- ATEX
- Niche informatique
- Table antivibratile
- Climatisation
- Eclairage inactinique
- Filtres HEPA à joints fluides
- Filtres ULPA

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE ASSUREES PAR LE CONSTRUCTEUR ADS LAMINAIRE